

Grâce à son crochet rétractable et à la souplesse unique de son fil, le **Fil d'Ariane®** constitue un dispositif efficace pour le repérage des micro calcifications et des lésions mammaires.

### FIL D'ARIANE® ET FIL D'ARIANE II®


#### ► Un geste simple...

- Ailettes et bouton poussoir permettant une utilisation d'une seule main,
- Indicateur sur les ailettes révélant le sens d'ouverture du crochet,
  - Positionnement sous échographie ou mammographie.



#### ► ...qui respecte le confort du patient...

- Mise en place du harpon possible plusieurs heures avant l'intervention,
- Pas de guide métallique rigide mais un fil souple,
- Une aiguille de 20 gauges avec biseau à facettes.

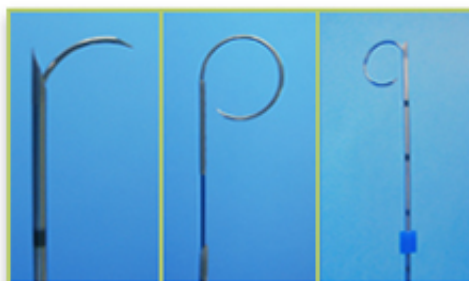

#### ► ...pour un repérage précis...

- Sortie du crochet immédiate à la pointe de l'aiguille,
- Repère centimétrique et pointe de l'aiguille échogène.

#### ► ...et un ancrage très efficace.

- Un crochet unique en forme de boucle avec une pointe affûtée favorisant la pénétration dans les tissus pour une meilleure tenue de l'ancrage,
- Repère centimétrique et pointe de l'aiguille échogène.
- Un diamètre adapté du crochet de 8mm,
- Crochet repositionnable,
- Un fil guide métallique ou en polyamide souple pour réduire significativement les risques de migration.

#### ► Références Produits FIL D'ARIANE®

Le Fil d'Ariane est disponible en trois modèles :

- Fil d'Ariane® à fil polyamide FA
- Fil d'Ariane® à fil métallique FAM
- Fil d'Ariane II® compatible aux plaques à trous FA2

REFERENCES	DESIGNATIONS	AIGUILLE (L)	FIL
FA 20/7	Fil d'Ariane L70	70mm	Polyamide
FA 20/10	Fil d'Ariane L100	100mm	Polyamide
FAM 20/7	Fil d'Ariane L70	70mm	Métallique
FAM 20/10	Fil d'Ariane L100	100mm	Métallique
FA2 20/135	Fil d'Ariane L135	135mm	Métallique